




1. Remove items from box and place on a clean surface. Peel off protective cover from visor.

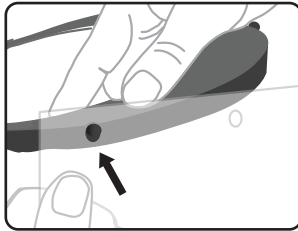

2. Ensure headset is positioned correctly with "top side" facing up. Align holes in visor with pins in headset (left to right).

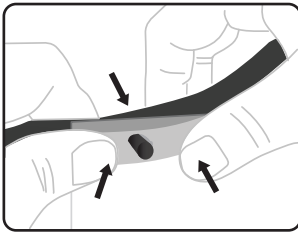

3. Attach visor to headset by snap-fitting each prong to hole (left to right).

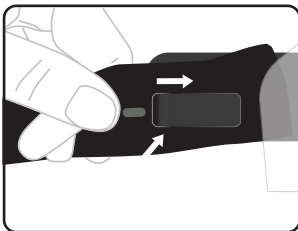

4. Thread headband band through tabs in headset.



5. Apply protective face shield to head and secure in place with headband.

Reusable Protective Face Shield

Personal protective equipment (PPE) designed to help protect your face, mouth and eyes from spray and splatter.

Product Features:

- Fast assembly and easy cleaning
- Adjustable Elastic band offers secure fit

DO NOT AUTOCLAVE

Each set includes one each of these component parts:



SAFETY TIPS

- Each headset should be cleaned between uses
- Parts should not be shared between persons without submitting for sterilization

Headset

Materials

Headband - Black ABS

Foam Liner - Closed Cell, Crosslined Polyethylene foam

Foam Insert - Closed cell, crosslinked Polyethylene foam

Usage

Multi-Use

Sterilization

PACKAGED NON-STERILE

Sterilization/Cleaning Instructions

Bleach (sodium hypochlorite)
0.5% (1:10 bleach: water), 2 mins
Soap/detergent + water
Cleaning of dirt only (not sterilizing)
air dry

Please Recycle



Visor

Dimensions

240mm x 317 mm

240mm x 360 mm

Materials

.51mm Thick PETG

Usage

Multi-Use

Sterilization

PACKAGED NON-STERILE

Sterilization/Cleaning Instructions

Isopropyl alcohol - 75-99% 5 minutes
Bleach (sodium hypochlorite) 0.5%
(1:10 bleach: water), 2 mins
Ethanol 70-80% maximum, 5 mins

Headband

Dimensions

Adjustable Elastic Band

Materials

Polyester Woven Elastic

Usage

Single-Use

Sterilization

PACKAGED NON-STERILE

Cleaning Instructions

Launder Wash / Standard Dry Cycle

Flexfit

The headband is designed for a adjustable fit. Re-position the headband for a more comfortable fit.

100% Satisfaction Guaranteed[†]


[†]SS White's 100% guarantee is on all of our products. If you are not completely satisfied with your purchase, we will issue a full refund of the purchase price.
©2020 SS White All Rights Reserved. SS White® is a registered trademarks of SS White Dental.

IFU-FaceShield


SS WHITE Dental®

Better Patient Outcomes
Improved Efficiency
Faster Practice Growth


1145 Towbin Avenue Lakewood, New Jersey 08701
www.sswhitedental.com

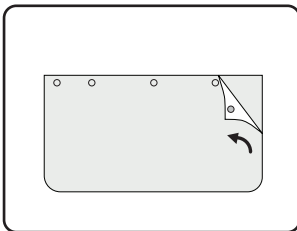


1. Retire los elementos de la caja y colóquelos sobre una superficie limpia. Retire la cubierta protectora de el visor.

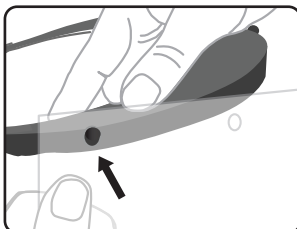

2. Asegúrese de que los auriculares estén colocados correctamente de "lado superior" hacia arriba. Alinee los agujeros de el visor con las puntas en los auriculares (de izquierda a derecha).

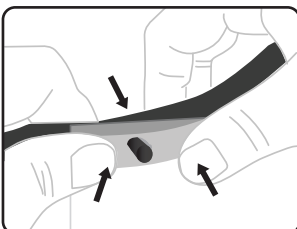

3. Fije el visor al auricular ajustando cada punta al agujero (de izquierda a derecha).

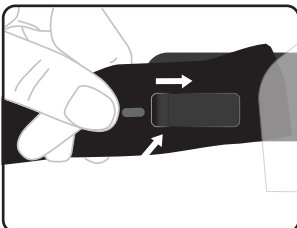

4. Enrosque la banda a través de las puntas de los auriculares.



5. Aplique el escudo facial en la cabeza y asegúrelo en su lugar con la banda.

Escudo Facial Reutilizable

Equipo de protección personal (EPP) diseñado para ayudar a proteger la cara, la boca y los ojos de aerosoles y salpicaduras.

Características del Producto:

- Montaje rápido y fácil de limpiar
- La banda elástica es ajustable y ofrece un ajuste seguro

NO AUTOCLAVE

Cada conjunto incluye una de estas partes:



CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Cada auricular debe limpiarse entre usos
- Las piezas no deben compartirse entre personas sin someterse a esterilización

Auricular

Materiales

Banda de Cabeza - ABS Negro

Forro de espuma - Celda cerrada, espuma de polietileno con línea cruzada

Inserto de espuma - Celda cerrada, espuma de polietileno reticulada

Uso

Multi-Uso

Esterilización

EMPAQUETADO NO-STERILE

Instrucciones de Esterilización/Limpieza

Lejía (hipoclorito de sodio) 0.5% - (1:10 lejía: agua), 2 minutos jabón/detergente + agua Limpieza de la suciedad solamente (no esterilizante) secar sólo al aire

Visor

Dimensiones

240mm x 317 mm

240mm x 360 mm

Materiales

PETG de .51mm de Grueso

Uso

Multi-Uso

Esterilización

EMPAQUETADO NO-STERILE

Instrucciones de Esterilización/Limpieza

Alcohol isopropílico - 75-99% 5 minutos
Lejía (hipoclorito de sodio) 0.5% (1:10 lejía: agua), 2 minutos de etanol 70-80% máximo, 5 minutos

Banda de Cabeza

Dimensiones

Banda elástica ajustable

Materiales

Elástico de Poliéster Tejido

Uso

De un solo uso

Esterilización

EMPAQUETADO NO-STERILE

Instrucciones de Limpieza

Lavar / Ciclo seco estándar

Ajuste Flexible

La banda está diseñada ajustable para un ajuste más cómodo.

Por favor, reciclar



PET

VISOR



PP

BANDA DE CABEZA

SS White Dental®

Better Patient Outcomes
Improved Efficiency
Faster Practice Growth

100% Satisfacción Garantizada[†]

[†]La garantía del 100% de SS White está en todos nuestros productos. Si no está completamente satisfecho con su compra, emitiremos un reembolso completo del precio de compra.
©2020 SS White reserva todos los derechos. SS White® es una marca comercial registrada de SS White Dental.

IFU-FaceShield

1145 Towbin Avenue Lakewood, New Jersey 08701
www.sswhitedental.com