

JAZZ[®]

POLISHERS

Directions for Use



Risk if re-used - If product is used properly, after initial use, quality will be compromised after initial use.

1-step diamond polishing system for smoothing and polishing dental composites to the ultimate shine.

Indications:
Ultimate single-step polishing of all composite restorations.

Directions for use:
Trim and smooth restoration with **diamond or carbide finishing bur** to maximum smoothness.

- 1) **Polish** with Jazz Supreme beginning with firm pressure and higher speed. Maximum rpm: 15,000. Wipe restoration with cotton. Continue polishing with reduced pressure and speed with light touch to create desired shine.
- 2) For best results, polish wet.

Composition: All Supreme polishes contain a synthetic rubber matrix infused with diamond particles in various sizes and pigments (mainly Titanium Dioxide). The shanks are made of stainless steel and are surface refined with gold flashing.



Risk if re-used - If product is used properly, after initial use, quality will be compromised after initial use.

2-step diamond polishing system for smoothing and polishing dental composites to a high-luster.

Indications:
High-luster polishing of all composite restorations.

Directions for use:
1) Reduce and smooth with **medium grit (pink)** polisher.
2) Finish to high-luster with **fine grit (white)** polisher.

IMPORTANT: Clean restoration surface with gauze between polishing steps to remove polish residues.
Polish wet at 8,000 rpm. Maximum rpm: 15,000.

Composition:
All C2S polishes contain a synthetic rubber matrix infused with diamond particles in various sizes and pigments (mainly Titanium Dioxide). The shanks are made of stainless steel.



Risk if re-used - If product is used properly, after initial use, quality will be compromised after initial use.

1-step diamond polishing system for smoothing and polishing dental composites to a high-gloss.

Indications:
High-gloss single-step polishing of all composite restorations.

Directions for use:
1) **Polish** inished restoration until desired shine is achieved.
Polish wet at 8,000 rpm. Maximum rpm: 15,000.

Disposable tool NOT for Reuse.

Composition:
All C1S polishes contain a synthetic rubber matrix infused with diamond particles in various sizes and pigments (mainly Titanium Dioxide). The shanks are made of high performance polymer.



Risk if re-used - If product is used properly, after initial use, quality will be compromised after initial use.

3-step polishing system for smoothing and polishing dental porcelain and metals to a high-luster.

Indications:
High-luster polishing of all porcelain & metal restorations.

Directions for use:
1) Reduce and trim with **coarse grit (green)** polisher.
2) Smooth with **medium grit (pink)** polisher.
3) Finish to high-luster with **fine grit (white)** polisher.
Polish wet or dry at 8,000 rpm. Maximum rpm: 15,000.

Composition:
All P3S polishes contain synthetic rubber, diamond grain in various sizes and pigments (mainly Titanium Dioxide). The shanks are made of stainless steel.



Risk if re-used - If product is used properly, after initial use, quality will be compromised after initial use.

2-step polishing system for smoothing and polishing dental porcelain and metals to a high-gloss.

Indications:
High-gloss polishing of all porcelain & metal restorations.

Directions for use:
1) Reduce and smooth with **medium grit (pink)** polisher.
2) Finish to final gloss with **fine grit (yellow)** polisher.
Polish wet or dry at 8,000 rpm. Maximum rpm: 15,000.

Disposable tool NOT for Reuse.

Composition:
All P2S polishes contain a silicone matrix infused with silicon carbide particles in various sizes and pigments (mainly Titanium Dioxide). The shanks are made of high quality polymer.

Warnings:
The product should not be used if a patient is known to be allergic to any of the ingredients of the polishing instruments.
Avoid inhaling grinding dust.
Do not exceed maximum rotary speed.

Storage:
Storage temperature 2-28°C/36-82°F.
Do not expose to direct sunlight.
Keep out of the reach of children!
For use in dentistry only!

Cleaning Instructions:
1) Clean burs of visible debris. Automatic washing is preferable.
2) Vacuum autoclave 20 minutes 134°C.



Risk if re-used - If product is used properly, after initial use, quality will be compromised after initial use.

JAZZ[®]

POLISHERS

Instrucciones de uso



Riesgo si se reutiliza: si el producto se usa correctamente, después del uso inicial, la calidad se verá comprometida después del uso inicial.

El sistema de pulido con diamante en un paso para alisar y pulir piezas dentales para lograr el máximo brillo.

Indicaciones:
Lo último en pulido en un solo paso de todas las reparaciones de piezas dentales.

Instrucciones de uso:
Rebaje y alise el arreglo con fresa de punta de diamante o carbono para lograr el máximo alisado.

- 1) **El pulido** con Jazz Supreme comienza con una presión firme y mayor velocidad. Rpm máx.: 15.000. Limpie la restauración con algodón. Continúe puliendo con menor presión y velocidad y con un ligero toque para crear el brillo deseado.
- 2) Para obtener mejores resultados, realice el pulido sobre superficies mojadas.

Composición: Todos los pulidores Supreme contienen una matriz de caucho sintético que contiene partículas de diamante en varios tamaños y pigmentos (principalmente dióxido de titanio). Los vástagos están fabricados con acero inoxidable y su refinada superficie posee un reflejo dorado.



Riesgo si se reutiliza: si el producto se usa correctamente, después del uso inicial, la calidad se verá comprometida después del uso inicial.

El sistema de pulido con diamante en dos pasos para alisar y pulir piezas dentales para lograr el máximo lustre.

Indicaciones:
Pulido de máximo lustre para todos los arreglos de piezas dentales.

Instrucciones de uso:
1) Reduzca y alise con pulidor de **de grano medio (rosa)**.
2) Acabado para un máximo lustre con un pulidor de **grano fino (blanco)**.

IMPORTANT: Limpie la superficie de la restauración con gasa entre los pasos de pulido para eliminar los residuos.
Pula sobre superficies mojadas a 8.000 rpm. Rpm máx.: 15.000.

Composición:
Todos los pulidores C2S contienen una matriz de caucho sintético que contiene partículas de diamante en varios tamaños y pigmentos (principalmente dióxido de titanio). Los vástagos están fabricados con acero inoxidable.



Riesgo si se reutiliza: si el producto se usa correctamente, después del uso inicial, la calidad se verá comprometida después del uso inicial.

El sistema de pulido con diamante en un paso para alisar y pulir piezas dentales para lograr el máximo brillo.

Indicaciones:
Lo último en pulido de máximo brillo en un solo paso de todas las restauraciones de piezas dentales.

Instrucciones de uso:
1) Pula la restauración terminada hasta lograr el brillo deseado.
Pula sobre superficies mojadas a 8.000 rpm. Rpm máx.: 15.000.

Herramienta descartable. Usar UNA sola vez.

Composición:
Todos los pulidores C1S contienen una matriz de caucho sintético que contiene partículas de diamante en varios tamaños y pigmentos (principalmente dióxido de titanio). Los vástagos están fabricados con un polímero de alto rendimiento.



Riesgo si se reutiliza: si el producto se usa correctamente, después del uso inicial, la calidad se verá comprometida después del uso inicial.

El sistema de pulido con diamante en tres pasos para alisar y pulir piezas dentales de porcelana y metal para lograr el máximo lustre.

Indicaciones:
Pulido de máximo lustre para todas las restauraciones de porcelana y metal.

Instrucciones de uso:
1) Reduzca y rebaje con un pulidor de **grano grueso (verde)**.
2) Reduzca con un pulidor de **grano medio (rosa)**.
3) Acabado para un máximo lustre con un pulidor de **grano fino (blanco)**.

Pula sobre superficies mojadas o secas a 8.000 rpm. Rpm máx.: 15.000.

Composición:
Todos los pulidores P3S contienen caucho sintético, granulado de diamante en varios tamaños y pigmentos (principalmente dióxido de titanio). Los vástagos están fabricados con acero inoxidable.



Riesgo si se reutiliza: si el producto se usa correctamente, después del uso inicial, la calidad se verá comprometida después del uso inicial.

El sistema de pulido con diamante en dos pasos para alisar y pulir piezas dentales de porcelana y metal para lograr el máximo lustre.

Indicaciones:
Pulido de máximo lustre para todas las restauraciones de porcelana y metal.

Instrucciones de uso:
1) Reduzca y alise con pulidor de **de grano medio (rosa)**.
2) Acabado para un brillo máximo con un pulidor de **grano fino (amarillo)**.

Pula sobre superficies mojadas o secas a 8.000 rpm. Rpm máx.: 15.000.

Herramienta descartable. Usar una SOLA vez.

Composición:
Todos los pulidores P2S contienen una matriz de silicona con partículas de carbono en varios tamaños y pigmentos (principalmente dióxido de titanio). Los vástagos están fabricados con un polímero de alta calidad.

Advertencias:
En caso de que el paciente sea alérgico a cualquiera de los componentes de los instrumentos de pulido no deberá utilizarse este producto. Evite inhalar el polvo residual del pulido.
No exceda la velocidad rotatoria máxima.

Almacenamiento:
Almacene a una temperatura de 2 a 28°C (36 a 82°F). No lo exponga a la luz solar directa. Mantenga alejado de los niños.
¡Para uso exclusivo en odontología!

Instrucciones de limpieza:
1) Limpie todo residuo visible de las fresas. Se recomienda el lavado automático.
2) Autoclave de vacío 20 minutos 134 °C.



Riesgo si se reutiliza: si el producto se usa correctamente, después del uso inicial, la calidad se verá comprometida después del uso inicial.

JAZZ[®]

POLISHERS

Instruções de utilização



Risco se reutilizado - Se o produto for usado corretamente, após o uso inicial, a qualidade será comprometida após o uso inicial.

Sistema de polimento com diamante de 1 passo para alisar e polir os compósitos dentários para o brilho máximo.

Indicações:
Polimento final de um único passo de todas as restaurações de compósitos.

Instruções de utilização:
Desbastar e alisar restauração com a broca de acabamento em diamante ou carboneto para a máxima suavidade.

- 1) **Polir** com a Jazz Supreme, começando com pressão firme e maior velocidade. Rpm máxima: 15 000. Limpar a restauração com algodão. Continuar a polir com pressão e velocidade reduzida com um toque leve para criar o brilho pretendido.
- 2) Para melhores resultados, polir sob água.

Composição: Todos os polidores Supreme contêm uma matriz de borracha sintética impregnada com partículas de diamante em vários tamanhos e pigmentos (principalmente dióxido de titânio). As hastes são fabricadas em aço inoxidável e a sua superfície tem um acabamento em ouro brilhante.



Risco se reutilizado - Se o produto for usado corretamente, após o uso inicial, a qualidade será comprometida após o uso inicial.

Sistema de polimento com diamante de 1 passo para alisar e polir os compósitos dentários para um grande brilho.

Indicações:
Polimento de alto brilho de todas as restaurações de compósitos.

Instruções de utilização:
1) Reduzir e alisar com polidor de **granulometria média (cor-de-rosa)**.

2) Fazer acabamento para um grande brilho com polidor de **granulometria fina (branco)**.

IMPORTANT: Limpar a superfície da restauração com gaze entre os passos de polimento para remover os resíduos daí resultantes. Polir sob água a 8,000 rpm. Rpm máxima: 15,000.

Composição:
Todos os polidores C2S contêm uma matriz de borracha sintética impregnada com partículas de diamante em vários tamanhos e pigmentos (principalmente dióxido de titânio). As hastes são fabricadas em aço inoxidável.



Risco se reutilizado - Se o produto for usado corretamente, após o uso inicial, a qualidade será comprometida após o uso inicial.

Sistema de polimento com diamante de 1 passo para alisar e polir os compósitos dentários para um grande brilho.

Indicações:
Polimento de grande brilho de um único passo de todas as restaurações com compósitos.

Instruções de utilização:
1) **Polir** a restauração finalizada até atingir o brilho pretendido. Polir sob água a 8,000 rpm. Rpm máxima: 15,000.

Ferramenta descartável, NÃO reutilizar.

Composição:
Todos os polidores C1S contêm uma matriz de borracha sintética impregnada com partículas de diamante em vários tamanhos e pigmentos (principalmente dióxido de titânio). As hastes são fabricadas em polímero de alto desempenho.



Risco se reutilizado - Se o produto for usado corretamente, após o uso inicial, a qualidade será comprometida após o uso inicial.

Sistema de polimento de três passos para alisar e polir a porcelana e metais dentários para um grande brilho.

Indicações:
Polimento de alto brilho de todas as restaurações em porcelana e metal.

Instruções de utilização:
1) Reduzir e desbastar com polidor de **granulometria grossa (verde)**.

2) Alisar com polidor de **granulometria média (cor-de-rosa)**.

3) Fazer acabamento para um grande brilho com polidor de **granulometria fina (branco)**.

Polir sob água a 8,000 rpm. Rpm máxima: 15,000.

Composição:
Todos os polidores P3S contêm borracha sintética, partículas de diamante em vários tamanhos e pigmentos (principalmente dióxido de titânio). As hastes são fabricadas em aço inoxidável.



Risco se reutilizado - Se o produto for usado corretamente, após o uso inicial, a qualidade será comprometida após o uso inicial.

Sistema de polimento de três passos para alisar e polir porcelana e metais dentários para um alto brilho.

Indicações:
Polimento de alto brilho de todas as restaurações em porcelana e metal.

Instruções de utilização:
1) Reduzir e alisar com polidor de **granulometria média (cor-de-rosa)**.

2) Fazer o acabamento para um brilho final com polidor de **granulometria fina (amarelo)**.

Polir sob água a 8,000 rpm. Rpm máxima: 15,000.

Ferramenta descartável, NÃO reutilizar.

Composição:
Todos os polidores P2S contêm uma matriz de borracha sintética impregnada com partículas de carboneto de silicone em vários tamanhos e pigmentos (principalmente dióxido de titânio).

As hastes são fabricadas em polímero de alta qualidade.

Avisos:
O produto não pode ser utilizado se um paciente tiver conhecimento de que é alérgico a qualquer um destes ingredientes dos instrumentos de polimento.

Evitar a inalação de pó de polimento.

Não exceder a velocidade de rotação máxima.

Armazenamento:
Temperatura de armazenamento 2-28°C. Não expor à luz solar directa. Manter fora do alcance de crianças! Apenas para utilização em medicina dentária!

Instruções de limpeza:
1) Limpar os resíduos visíveis das brocas. Preferir-se a lavagem automática.
2) Autoclave a vácuo 20 minutos 134 °C.



Risco se reutilizado - Se o produto for usado corretamente, após o uso inicial, a qualidade será comprometida após o uso inicial.

JAZZ[®]
POLISHERS
Istruzioni per l'uso



Sistema di lucidatura a un passaggio a base di diamante per la levigatura e la lucidatura dei compositi per la massima brillantezza.
Indicazioni:
Sistema definitivo a singolo passaggio per la lucidatura di tutti i restauri in composito.
Istruzioni per l'uso:
Rifinire e levigare il restauro con **frese di rifinitura diamantate o al carburo per la** massima levigatezza.
1) **Lucidare** con Jazz Supreme iniziando con una pressione decisa e con velocità elevata. Giri/min. massimi: 15.000. Pulire il restauro con del cotone. Continuare la lucidatura riducendo la pressione e la velocità, con un tocco più lieve per ottenere la brillantezza desiderata.
2) Per risultati ottimali, lucidare la superficie inumidita.
Composizione: Tutti i sistemi di lucidatura Supreme contengono una matrice in gomma sintetica con particelle di diamante di varie dimensioni e pigmenti (per lo più al biossido di titanio). I gambi sono realizzati in acciaio inox e la superficie è trattata con lucidatura dorata a specchio.



Sistema di lucidatura a due passaggi a base di diamante per la levigatura e la lucidatura dei compositi per una lucentezza ideale.
Indicazioni:
Sistema per una lucentezza ideale per la lucidatura di tutti i restauri in composito.
Istruzioni per l'uso:
1) Ridurre e levigare con un sistema di lucidatura a **grana media (rosa)**.
2) Rifinire alla massima lucentezza con un sistema di lucidatura a grana fine (bianco).
IMPORTANTE: Pulire la superficie del restauro con garza fra i passaggi per rimuovere i residui della lucidatura.
Lucidare su superficie inumidita a 8.000 giri/min. Giri/min. massimi: 15.000.
Composizione: Tutti i sistemi di lucidatura C2S contengono una matrice in gomma sintetica con particelle di diamante di varie dimensioni e pigmenti (per lo più al biossido di titanio). I gambi sono realizzati in acciaio inox.



Sistema di lucidatura a un passaggio a base di diamante per la levigatura e la lucidatura dei compositi dentali per una lucentezza ideale.
Indicazioni:
Sistema per una lucentezza ideale a singolo passaggio per la lucidatura di tutti i restauri in composito.
Istruzioni per l'uso:
1) **Lucidare** il restauro finito fino a ottenere la lucentezza desiderata. Lucidare su superficie inumidita a 8.000 giri/min. Giri/min. massimi: 15.000.
Strumento monouso; NON riutilizzare.
Composizione: Tutti i sistemi di lucidatura C1S contengono una matrice in gomma sintetica con particelle di diamante di varie dimensioni e pigmenti (per lo più al biossido di titanio). I gambi sono realizzati in polimeri ad alte prestazioni.




Sistema di lucidatura in tre passaggi a base di diamante per la levigatura e la lucidatura di porcellane e metalli dentali per una lucentezza ideale.
Indicazioni:
Sistema per una lucentezza ideale per la lucidatura di tutti i restauri in porcellana e metallo.
Istruzioni per l'uso:
1) Ridurre e rifinire con un sistema di lucidatura a **grana grossa (verde)**.
2) Levigare con un sistema di lucidatura a **grana media (rosa)**.
3) Rifinire alla massima lucentezza con un sistema di lucidatura a **grana fine (bianco)**. Lucidare su superficie inumidita o asciutta a 8.000 giri/min. Giri/min. massimi: 15.000.
Composizione: Tutti i sistemi di lucidatura P3S contengono gomma sintetica, particelle di diamante di varie dimensioni e pigmenti (per lo più al biossido di titanio). I gambi sono realizzati in acciaio inox.



Sistema di lucidatura a due passaggi per la levigatura e la lucidatura di porcellane e metalli dentali per una lucentezza ideale.
Indicazioni:
Sistema per una lucentezza ideale per la lucidatura di tutti i restauri in porcellana e metallo.
Istruzioni per l'uso:
1) Ridurre e levigare con un sistema di lucidatura a **grana media (rosa)**.
2) Rifinire alla lucentezza finale con un sistema di lucidatura a **grana fine (giallo)**. Lucidare su superficie inumidita o asciutta a 8.000 giri/min. Giri/min. massimi: 15.000.
Strumento monouso; NON riutilizzare.
Composizione:
Tutti i sistemi di lucidatura P2S contengono una matrice in silicone con particelle di carburo di silicone di varie dimensioni e pigmenti (per lo più al biossido di titanio). I gambi sono realizzati in polimeri di alta qualità.
Avvertenze:
Il prodotto non dovrebbe essere impiegato nei soggetti allergici a uno dei componenti degli strumenti di lucidatura. Evitare l'inalazione della polvere della lucidatura. Non superare la velocità massima di rotazione.
Conservazione: Temperatura di conservazione: 2-28 °C. Non esporre alla luce solare diretta. Tenere lontano dalla portata dei bambini! Solo per uso dentistico!
Procedure di pulizia:
1) Ripulire le frese dai detriti visibili. È preferibile il lavaggio a macchina.
2) Autoclave sotto vuoto 20 minuti 134 °C.

JAZZ[®]
POLISHERS
Gebrauchsanweisungen

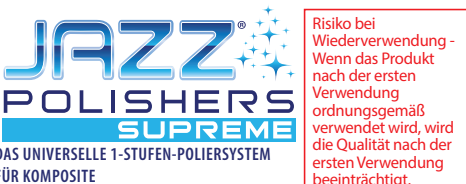

1-Stufen-Diamant-Poliersystem zum Glätten und Polieren von Dentalkompositen für unübertroffenen Hochglanz.
Indikationen:
Unübertroffenes Polieren aller Kompositrestaurationen in einem Schritt.
Gebrauchsanweisungen:
Für eine besonders glatte Oberfläche die Restauration mit Diamant- oder Hartmetall- Finierern zuschneiden und glätten.
1) Mit Jazz Supreme zunächst unter hohem Druck und mit höherer Drehzahlpolieren. Maximale Drehzahl: 15.000. Restauration mit Watte abwischen. Unter niedrigerem Druck und mit geringerer Drehzahl weiterpolieren, bis der gewünschte Glanz erreicht ist.
2) Optimaler Glanz wird beim Nasspolieren erreicht.
Zusammensetzung: Supreme Polierer bestehen aus einer Matrix aus Synthesekautschuk mit unterschiedlich großen Diamantpartikeln und Pigmenten (hauptsächlich Titandioxid). Der Schaft besteht aus rostfreiem Stahl und die Oberfläche ist mit Gold überzogen.



2-Stufen-Diamant-Poliersystem zum Glätten und Polieren von Dentalkompositen auf Hochglanz.
Indikationen:
Polieren aller Kompositrestaurationen auf Hochglanz.
Gebrauchsanweisungen:
1) Mit einem Polierer mit **mittlerer Körnung (pink)** abtragen und glätten.
2) Mit einem Polierer mit **feiner Körnung (weiß)** auf Hochglanz polieren.
WICHTIG: Restaurationsoberfläche zwischen den Polierschritten mit Gaze reinigen, um Polierreste zu entfernen. Bei 8000 min-1 Nasspolieren. Maximale Drehzahl: 15.000.
Zusammensetzung:
C2S-Polierer bestehen aus einer Matrix aus Synthesekautschuk mit unterschiedlich großen Diamantpartikeln und Pigmenten (hauptsächlich Titandioxid). Der Schaft besteht aus rostfreiem Stahl.



1-Stufen-Diamant-Poliersystem zum Glätten und Polieren von Dentalkompositen auf Hochglanz.
Indikationen:
Polieren aller Kompositrestaurationen auf Hochglanz in einem Schritt.
Gebrauchsanweisungen:
1) Geglättete Restauration polieren, bis der gewünschte Glanz erreicht ist. Bei 8000 min-1 Nasspolieren. Maximale Drehzahl: 15.000.
Einmalinstrument NICHT wiederverwenden.
Zusammensetzung:
C1S-Polierer bestehen aus einer Matrix aus Synthesekautschuk mit unterschiedlich großen Diamantpartikeln und Pigmenten (hauptsächlich Titandioxid). Der Schaft besteht aus Hochleistungspolymer.



3-Stufen-Poliersystem zum Glätten und Polieren von Dentalporzellan und -metallen auf Hochglanz.
Indikationen:
Polieren aller Porzellan- & Metallrestaurationen auf Hochglanz.
Gebrauchsanweisungen:
1) Mit einem Polierer mit grober Körnung (grün) abtragen und zuschneiden.
2) Mit einem Polierer mit mittlerer Körnung (pink) glätten.
3) Mit einem Polierer mit feiner Körnung (weiß) auf Hochglanz polieren.
Bei 8000 min-1 Nass- oder Trockenpolieren. Maximale Drehzahl: 15.000.
Zusammensetzung:
P3S-Polierer enthalten Synthesekautschuk, unterschiedlich große Diamantpartikel und Pigmente (hauptsächlich Titandioxid). Der Schaft besteht aus rostfreiem Stahl.



2-Stufen-Poliersystem zum Glätten und Polieren von Dentalporzellan und -metallen auf Hochglanz.
Indikationen:
Polieren aller Porzellan- & Metallrestaurationen auf Hochglanz.
Gebrauchsanweisungen:
1) Mit einem Polierer mit mittlerer Körnung (pink) abtragen und glätten.
2) Mit einem Polierer mit feiner Körnung (gelb) abschließend auf Hochglanz polieren.
Bei 8000 min-1 Nass- oder Trockenpolieren. Maximale Drehzahl: 15.000.
Einmalinstrument NICHT wiederverwenden.
Zusammensetzung:
P2S-Polierer bestehen aus einer Siliziummatrix mit unterschiedlich großen Siliziumkarbidpartikeln und Pigmenten (hauptsächlich Titandioxid). Der Schaft besteht aus hochwertigem Polymer.
Warnhinweise:
Das Produkt nicht bei Patienten verwenden, die auf einen der Bestandteile der Polierinstrumente allergisch reagieren. Den Schleifstaub nicht einatmen. Die maximale Drehzahl nicht überschreiten.
Lagerung:
Lagertemperatur 2-28 °C. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den Einsatz in der Zahnmedizin!
Reinigungsanleitung:
1) Sichtbare Rückstände auf den Fräsen entfernen. Ein automatischer Waschvorgang ist vorzuziehen.
2) Vakuumautoklav 20 Minuten 134 °C.